

## 傅立叶变换红外光谱仪 IRSpirit



### IRSpirit, Ready to Run

IRSpirit提供同档次仪器中的高信噪比，同时用源自高端仪器的先进技术来保证高可靠性。专属的IR Pilot程序极大简化了日常分析工作。

### 空间利用率高，扩展性好

尽管仪器整体尺寸小巧，样品室却保持与高端型号的仪器一样宽，以方便兼容各种岛津和第三方红外附件。这意味着本机可应对多种场合的应用。

测试样品时仪器可双向摆放（横放或竖放），适合特定的狭小空间。



开关和湿度指示灯兼顾了横竖双向可及可见。

小红外，同样可以有一个标准大样品室。



拥有小红外仪器中的超大样品室，可直接兼容已有的岛津附件和第三方的通用红外附件。

## 专属的IR Pilot程序


全新开发的专属程序 ( IR Pilot ) 提供了23个标准应用的工作流, 分为4大类: 定性鉴别、异物分析、定量分析和膜厚计算。只需简单选择分析目的和所用附件, 不用设置任何参数即可自动执行, 即使没有FTIR经验的操作人员也能轻松得到分析结果。



\*LabSolutions DB/CS版本软件无法使用IR Pilot的定量分析功能。

## 高可靠性, 使用起来信心十足

IRSpirit使用源自高端仪器的先进技术, 能获得高信噪比的可靠数据。而且, 经受考验的稳健光学设计, 保证系统在严酷的温湿度条件下也能可靠地使用。

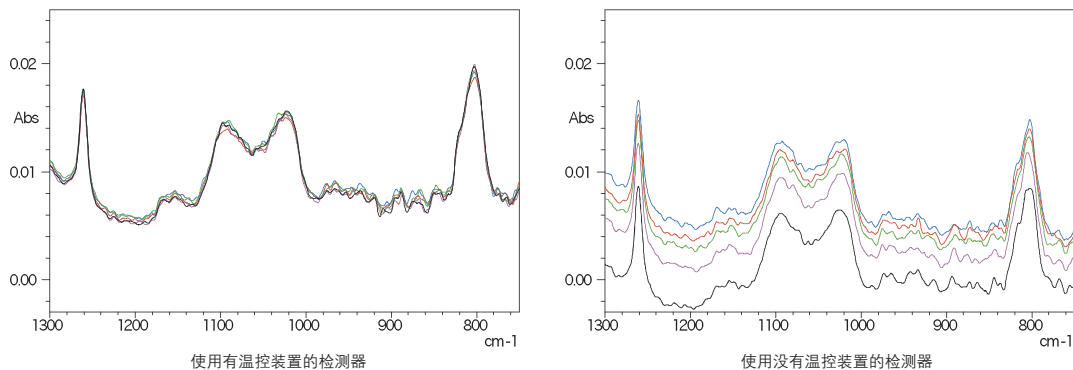

ATR光谱, 测量石蜡油中的硅油含量 ( 重复测量5次 )

当使用没有温控装置的检测器时, 仪器内部热量和环境温度可能引起数据基线大的波动。对比明显地是, 使用了有温控装置的检测器, 能提供可重现的可靠数据。

北京  
电话: (010) 8525-2310/2312  
上海  
电话: (021) 3419-3888  
沈阳  
电话: (024) 2341-4778  
郑州  
电话: (0371)8663-2981/2983

乌鲁木齐  
电话: (0991) 230-6271/6272  
昆明  
电话: (0871) 6315-2987  
南京  
电话: (025) 8689-0258

<http://www.shimadzu.com.cn>

用户服务热线电话: 800-8100439 400-6500439

成都  
电话: (028)8619-8421/8422  
广州  
电话: (020) 8710-8666  
西安  
电话: (029) 8838-6350

深圳  
电话: (0755) 8340-2852  
重庆  
电话: (023) 6380-6068/6058  
武汉  
电话: (027) 8555-7910

印刷日期: 2017.12

注: 此样本所有信息仅供参考, 如有变动恕不另行通知